



sculpt  
& shape®

## The shape of beauty

Tehnologia inovatoare RotateRF  
pentru remodelare corporala si rejuvenare faciala



# Sculpt&Shape® ofera tratamente versatile si accesibile pentru locatia ta.


Tehnologia noastra tinteste diferite straturi cutanate pentru a obtine cele mai bune rezultate.



## 6 aplicatoare, 1 solutie unica

Aplicatoarele Sculpt&Shape® monopolare si bipolare sunt create special pentru a trata o varietate de zone faciale si corporale.

MONOPOLAR RF

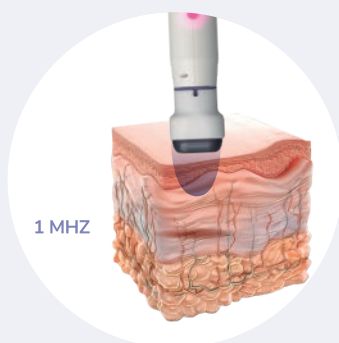

### Shine

Aplicator sferic pentru **reducerea ridurilor si a liniilor fine**



### Firm

**Skin tightening** pentru zone corporale mici si zone faciale



### Shape


**Fermitate si reducere celulita** pentru zonele medii ale corpului



### Boost

**Fermitate si reducere celulita** pentru zonele mari ale corpului

BIPOLAR RF

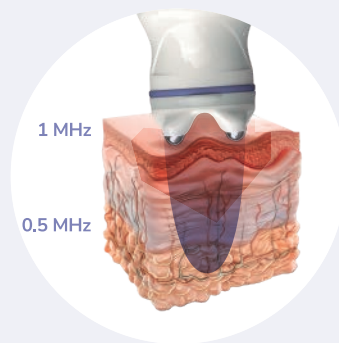

### Sculpt6

**Reducere celulita si remodelare corporala** pentru zonele medii



### Sculpt8


**Reducere celulita si remodelare corporala** pentru zonele mari

Aplicatoarele noastre create special concav iti permit sa-ti alegi frecventele recomandate pentru fiecare tratament. Suprafetele concave sunt folosite pentru a mari adancimea de penetrare si a ajunge la grasimea localizata.




## Tehnologia Rotate RF

Aplicatorul nostru rotativ 360° incalzeste in mod uniform zonele de tratament si asigura o experienta placuta atat pentru pacient cat si pentru terapeut


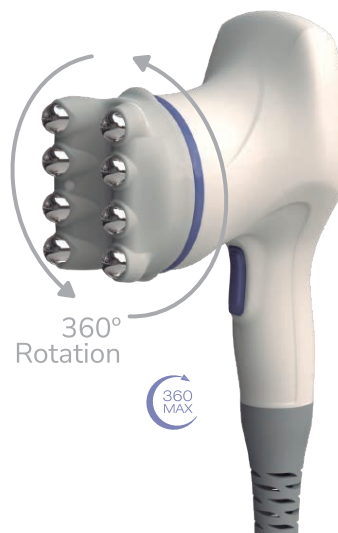


*Tratamente rapide  
cu rezultate de  
lunga durata!*

FARA ROTATIE

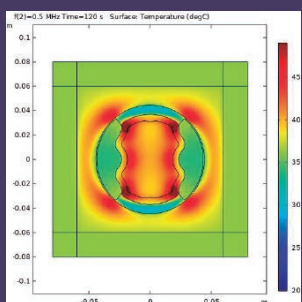

CU ROTATIE

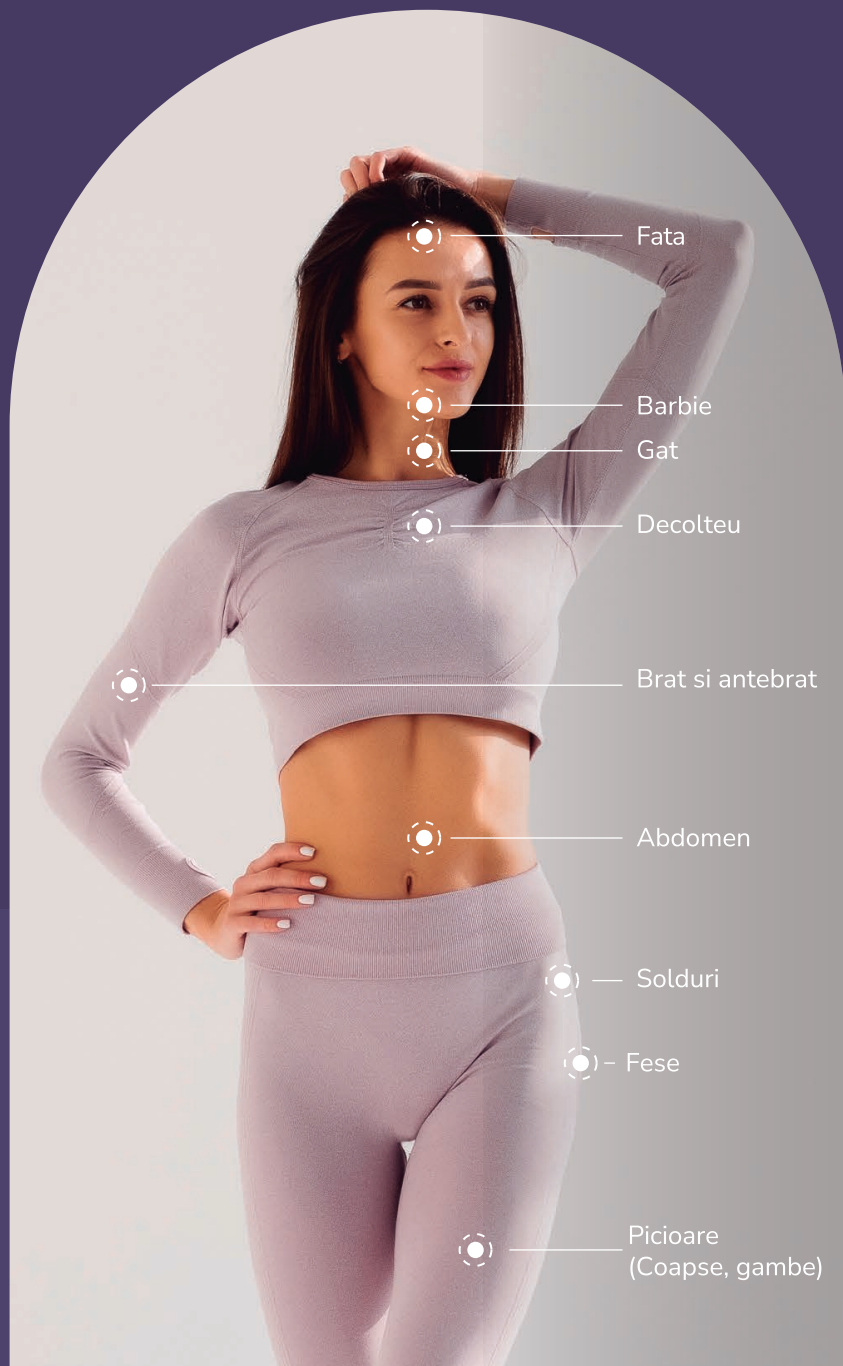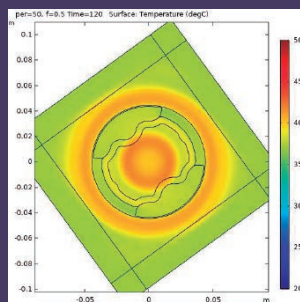

## Asigura o incalzire omogena evitand zonele supraincalzite

- Faciliteaza miscarea aplicatorului.
- Ajuta la drenajul limfatic.
- Ajuta la eliminarea lichidului interstitial.
- Reduce oboseala terapeutului.




**Controlul automat al temperaturii** este obtinut cu ajutorul monitorizarii in timp real prin senzori infrarosu si reglare automata a puterii.



**Tehnologie sigura la atingere** este data de masurarea impedantei din tesut ce optimizeaza livrarea caldurii in zona de tratament.

### Masurarea impedantei si a puterii

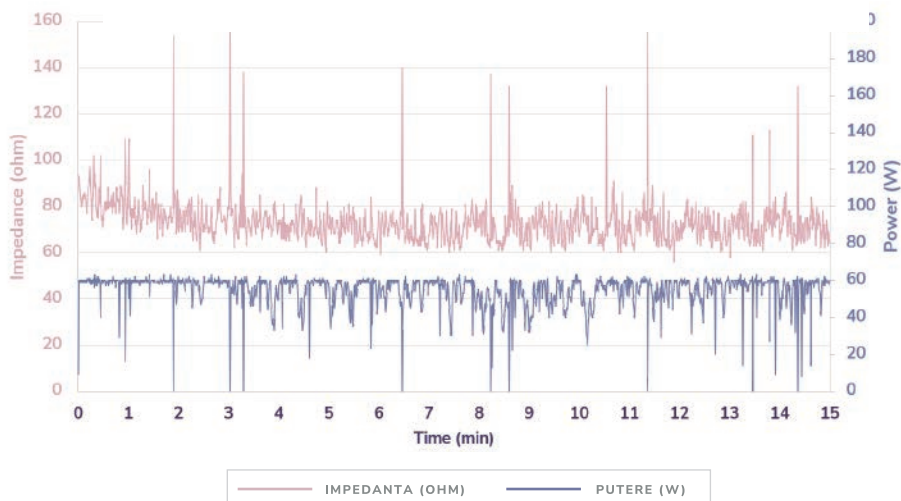

Impedanta reala si puterea masurata pe piciorul unui pacient utilizand aplicatorul Sculpt6.



INAINTE



DUPA 4 LUNI

### Fermitate si reducerea ridurilor

Aplicatoare: Firm si Shine | 8 Sedinte



INAINTE

### Laxitate gat

Aplicator: Firm | 4 Sedinte



INAINTE



DUPA 3 LUNI

### Remodelare abdomen

Aplicator: Sculpt6, Sculpt8 | 8 Sedinte



DUPA 1 LUNA

## Caracteristicile tehnice

Tip de echipament	Echipament RF uz profesional
<b>CARACTERISTICI TEHNICE</b>	
Frecventa	500 kHz –1 MHz
Putere RF maxima	pana la 180 W @ 100 Ω
Putere maxima motor 360Compact	15 W
Putere maxima motor 360Max	32,6 W
Numar aplicatori simultani	1
Conectori disponibili aplicator	2
Timp de lucru	5-20 min, in functie de zona
<b>SURSA DE ALIMENTARE</b>	
Alimentare electrica	Monofazic 100-240 Vac
Frecventa retea	50-60 Hz
Putere Maxima	600 W
<b>CARACTERISTICI FIZICE</b>	
Dimensiuni	520x628x1162 mm
Greutate	30 Kg
Interfata grafica	Touch screen 13.4"

## Sculpt&Shape® redefineste experienta pacientilor

**Tehnologia RotateRF** asigura o incalzire uniforma si maresc drenajul limfatic, obtinand rezultate clinice, fara timp de recuperare.

**Control al temperaturii in timp real**, automat si continuu, pentru a asigura o incalzire omogena in timpul tratamentului.

**Tehnologie sigura la atingere** ce previne arcurile electrice, oferind tratamente sigure si confortabile.

**Platforma versatila** cu diferite aplicatoare pentru diferite tratamente.

**Interfata usor de folosit.** Software intuitiv, ce ghideaza terapeutul, cu parametrii predefiniti.