

Vbeam Pro®

O nouă dimensiune în
tratamentul
leziunilor vasculare.
Acum la următorul nivel.

Cel mai avansat sistem care îmbină ultima
versiune a laserului PDL și Nd:Yag pentru o
varietate de tratamente dermatologice și estetice



 **CANDELA®**
Science. Results. Trust.



Vbeam - standardul consacrat al excelenței

De 40 de ani, familia de lasere Vbeam® de la Candela este recunoscută drept standardul de aur în tratamentele vasculare și se bucură de încrederea dermatologilor și chirurgilor plasticieni de renume din întreaga lume. Noul Vbeam Pro® duce această experiență la următorul nivel și marchează o nouă eră în tratamentul leziunilor vasculare. Conceput pentru utilizarea zilnică în cabinet și clinică, Vbeam Pro ridică standardul de fiabilitate și de performanță, oferă siguranță și rezultate clinice pentru o gamă extinsă de indicații.


Centrele de referință aleg tehnologia Candela, pentru rezultatele pe care le așteaptă pacienții

— **38** Ani de Inovație

— **1.000+** Publicații clinice

— **670+** Spitale și Universități din peste 23 de țări utilizează Vbeam

— **7.050+** de Sisteme instalate la nivel global

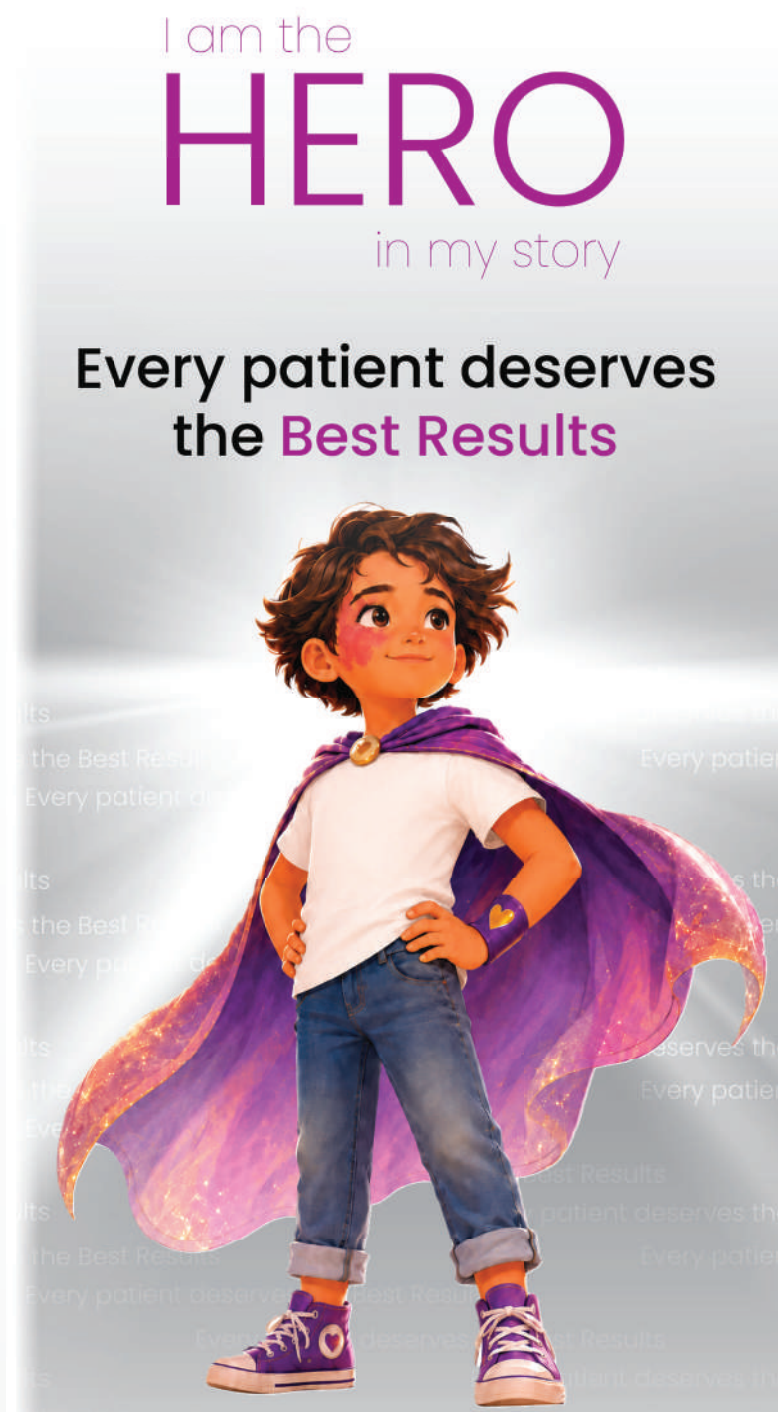


Soluția pentru o varietate de indicații dermatologice, indiferent de fototip

Un singur echipament pentru peste 45 de indicații

Tratamentele leziunilor vasculare, pigmentare și anumitor leziuni non-pigmentare sunt foarte bine tolerate de pacienți, având o rată scăzută de efecte secundare.

Mai multe indicații, mai mult control și confort sporit pentru pacient

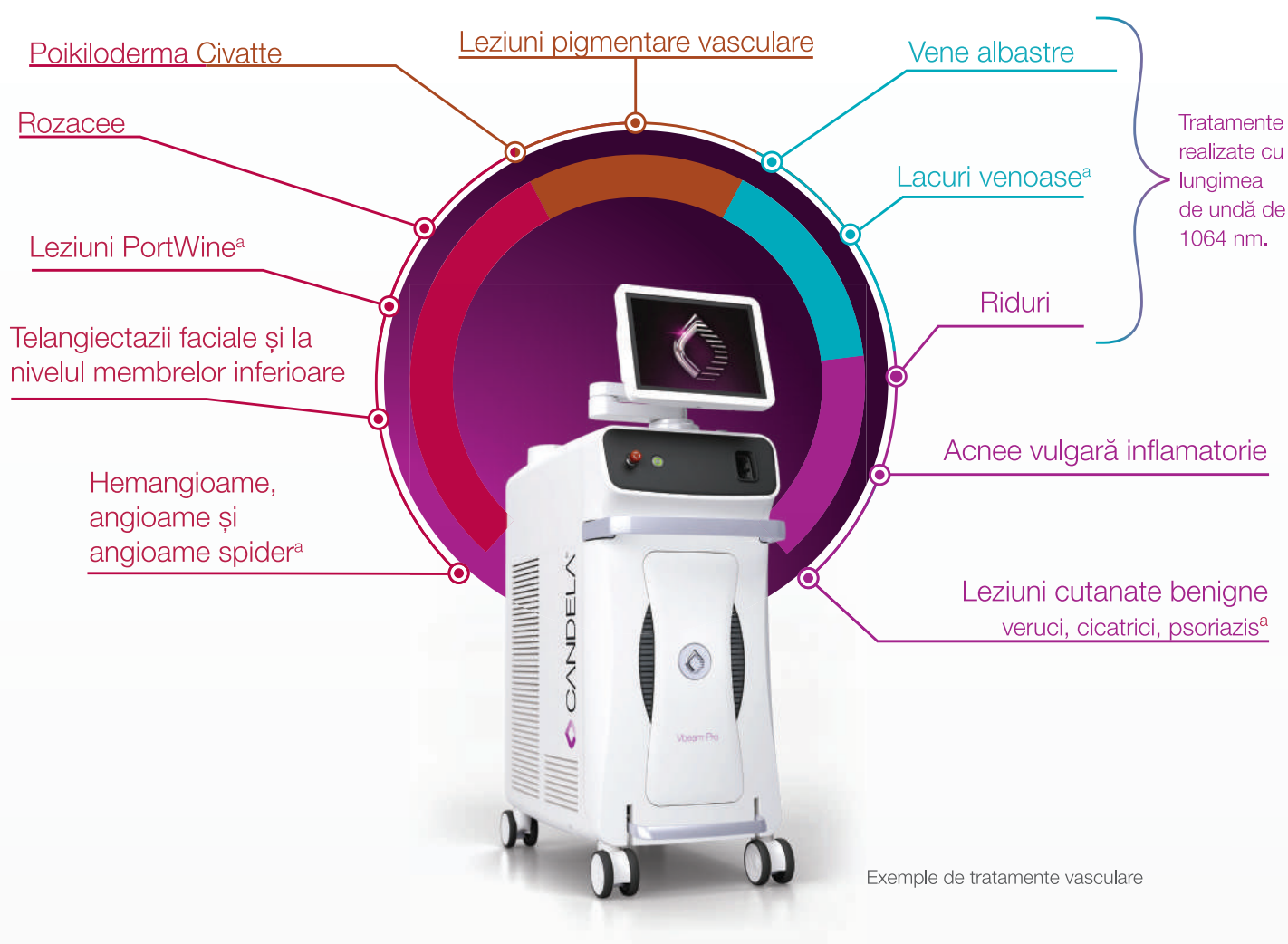

“

În clinica noastră s-au efectuat câteva sute de tratamente, a fost o experiență remarcabilă. Toți medicii din echipa noastră îl utilizează cu încredere, datorită performanțelor sale net superioare sistemului anterior. – Gilly Munavalli, MD, Charlotte, NC

”



POSSIBILITĂȚI DE TRATAMENT NELIMITATE

Standardul de aur

Lungimea de undă 595 nm

- Acoperă o gamă extinsă de indicații vasculare
- Poate fi utilizat în siguranță și pentru fototipurile cutanate închise⁵
- **Pătrunde mai profund** decât lungimile de undă mai scurte
- Absorbție ridicată în **oxihemoglobină**
- Nd:YAG 1064 nm pentru vasele din profunzime
- Permite tratarea **vaselor albastre și profunde**
- Poate fi utilizat pentru **toate fototipurile**
- Modul de lucru cu **rate de repetiții mari** care extinde astfel gama de indicații
- Durată a pulsului ajustabilă între **500 μs și 60 ms**

Sistem de răcire ajustabil înainte și după puls pentru o protecție epidermală îmbunătățită

- **Răcire precisă și uniformă** la fiecare puls
- Parametrii de răcire pot fi modificați pentru **confortul pacientului și protecția optimă a epidermei**

Cel mai precis Vbeam de până acum


Consecvența cu care este livrată energia la 595 nm, indiferent de nivelul selectat sau durata pulsului, face din Vbeam Pro **cel mai precis sistem Vbeam de până acum**

Ce aduce nou Vbeam Pro:

- **Precizie fără precedent, îmbunătățită cu 30%**⁶
- **Tratamente cu 50% mai rapide**²
- **Cu 20% mai puțină durere asociată tratamentului**^{3,4}
- **Rezultate cu 20% mai bune după o singură ședință**²

Spoturi mai mari. Energie crescută. Tratamente mai rapide cu rezultate îmbunătățite

- Spot de 15 mm, față de maxim 12 mm la generația anterioară
- **Mai multă energie pentru fiecare dintre spoturi**
- Spot eliptic unic de 3 x 10 mm pentru tratamentul telangiectaziilor liniare și de 7 și 10 mm pentru leziuni pigmentare

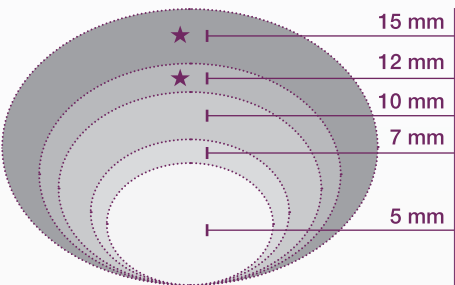

Zonă de tratament mai mare cu

56%
(12 vs 15 mm)

Eficiența Pro

Precis. Fiabil. Optim.

- Aprobat CE pentru peste 45 de indicații, fără limitări în ceea ce privește fototipul, spre deosebire de alte echipamente pentru tratamentul leziunilor vasculare

Eficiență maximă. Recuperare minimă.

- Îmbunătățirea sistemului de calibrare și tehnologia inovativă cu micro-pulsuri, **reduc purpura**
- **eficiență îmbunătățită cu 50% pentru răcirea cu DCD** comparativ cu cea de contact sau cu aer⁶

Ergonomie îmbunătățită

- sistem de susținere dinamic pentru fibră, cu o lungime de 4m, permite o mobilitate crescută în jurul pacientului și optimizarea tratamentului **indiferent de poziția în care se realizează acesta**
- Modul ghidat oferă un nivel ridicat de flexibilitate, permițând configurarea a până la **18 protocoale de tratament personalizate. Astfel, utilizarea devine mai intuitivă**

	Vbeam Perfecta	Vbeam Pro
Energia maximă	8 J	12 J
Dimensiunea maximă a spotului	12 mm	15 mm
Suprafața tratată	1.13 cm ²	1.77 cm ²
Fluența la 12 mm	7.1 J/cm ²	10.6 J/cm ²



Tratamente vasculare la următorul nivel. Tehnologie consacrată îmbunătățită.

Suportul Dinamic pentru Fibră

reduce greutatea percepută a aplicatorului

Sistem de livrare cu rază extinsă

permite acces facil pe orice zonă a corpului din orice parte a patului de tratament

Interfața actualizată și moduri de lucru ghidate

interfața permite setări personalizate de tratament

Două lungimi de undă PDL 595nm și Nd:YAG

1064nm cu răcire DCD acoperă o gamă extinsă de indicații pentru toate fototipurile cutanate

Ecran pivotant pentru vizibilitate mai bună și acces facil din orice unghi

Spoturi mai mari pentru eficiență fără precedent și timp de tratament redus considerabil

Noul Port de Calibrare asigură rezultate consistente și un control superior pentru apariția purperei

Durată de utilizare optimizată a DYE-ului pentru un volum mai mare de tratamente



“După sute de tratamente efectuate, sunt foarte mulțumit de noul sistem. Spoturile mai mari reduc considerabil timpul de tratament, iar întregul sistem m-a impresionat. – **Eric Bernstein, MD, Philadelphia, PA**”

Rezultatele vorbesc de la sine

Acnee și cicatrici post acneice



Lac Venos



Poikiloderma Civatte



Vena Periorbitală



Telangiectazii faciale



Leziuni pigmentare benigne



Echimoza post-procedură



Leziuni Port Wine





Vbeam Pro®

Tehnologia de
referință pentru
leziuni vasculare.
Acum la nivel Pro.

Dacă vreți să aflați mai multe informații

vizitați www.beautymed.ro



1. Căutare bibliografică în PubMed. 2. Susținut de feedbackul privind tratamentul oferit de participanții inițiali din cadrul LCR. 3. Date provenite de la centrele LCR, în comparație cu Perfecta. 4. Pe baza raportărilor pacienților din centrele LCR, în comparație cu sistemele Vbeam utilizate anterior. 5. Tratamentul cu succes pentru două cazuri pediatrice de pete „port-wine” la pacienți cu fototipuri cutanate mai închise, utilizând un laser cu lungimea de undă de 595 nm. Bae YS, Ng E, Geronemus RG. Lasers in Surgery and Medicine. 2016 Apr;48(4):339–342. 6. În comparație cu Vbeam Perfecta; date privind acuratețea și precizia emisiei la 595 nm a sistemului Vbeam, disponibile în arhivă. 7. Lasers and Energy Devices for the Skin, 2000; coordonatori/editori: Mitchel P. Goldman, Richard E. Fitzpatrick, E. Victor Ross, Suzanna Kilmer, Robert A. Weiss.

beautyMED

rezultatele pe care
le așteaptă **pacienții tăi**

Beauty Med Solution SRL

Str. Comandor Eugen Botez, Nr. 21,
Sector 2, București

0728 951 000 | office@beautymed.ro
www.beautymed.ro